

Updateinstallation BtM-Programm 2026, Version 4.3

Inhaltsverzeichnis

Voraussetzungen	1
Download.....	1
Installation.....	2
Onlineupdate	5
BtM-Duplikate zusammenführen	5
Aktualisierung der Produktlizenz an einem PC ohne Internetanschluss.....	5


Voraussetzungen

Im Folgenden wird die Installation des BtM-Programms 2026 als Update auf Version 4.3 beschrieben. Das Update muss auf das Verzeichnis angewendet werden, in dem sich das bereits installierte BtM-Programm befindet.

Für die Installation des Updates benötigen Sie Schreibrechte auf das Systemverzeichnis. Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie als Benutzer mit entsprechenden Rechten angemeldet sind.

Download

Zum Download der neuen Version klicken Sie bitte auf den in der E-Mail enthaltenen Link oder kopieren Sie die URL in die Adress-Zeile Ihres Browsers. Wir empfehlen dafür Chrome, Firefox oder Edge.

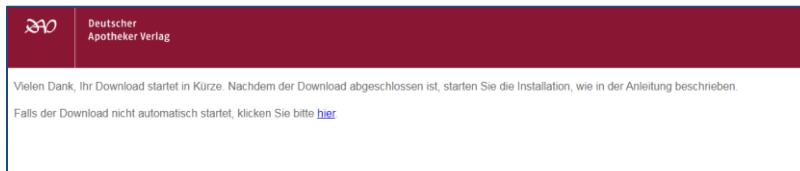

Sollte der Download nicht automatisch starten, kann er mit einem Klick auf [hier] manuell angestoßen werden.

Hinweis: Gegebenenfalls bestätigen Sie die Nachfrage Ihres Browsers zum Download und speichern Sie die Datei in Ihrem Download-Ordner.

Es wird eine zip-Datei heruntergeladen. Im Folgenden wird das Entpacken der zip-Datei beschrieben:

Unter Windows 11:

Klicken Sie die heruntergeladene Datei mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie nun den Menüpunkt „Alle extrahieren...“ aus. Im nächsten Schritt wählen Sie Ihren Zielordner aus (z.B. C:\Users\Downloads\BtM_2026)


Sie haben die ZIP-Datei nun entpackt und können den neu erstellten Ordner per Doppelklick öffnen.

Unter Windows 10:


Klicken Sie die heruntergeladene Datei mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie nun „Öffnen mit ... | Windows Explorer

Doppelklicken Sie anschließend auf die Anwendung „Start“.

Im darauffolgenden Fenster klicken Sie auf [Alle extrahieren].

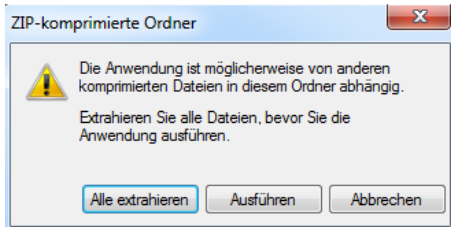

Es öffnet sich der Ordner, in den die Dateien extrahiert wurden. Bei einer Mehrplatzinstallation empfiehlt es sich, die heruntergeladenen Dateien auf einen Wechseldatenträger (z.B. USB-Stick) oder auf ein gemeinsames Netzlaufwerk zu entpacken bzw. zu kopieren. Doppelklicken Sie auf die Anwendung „Start“, um die Installation zu beginnen.

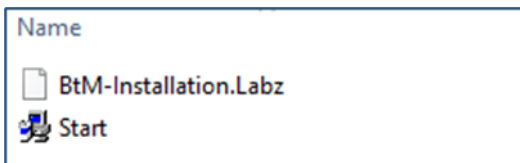

Sollte der Downloadlink bereits abgelaufen sein, erscheint im Browser die folgende Meldung.



Bitte wenden Sie sich in diesem Fall erneut an die in der Meldung eingetragene E-Mail-Adresse, um einen neuen Downloadlink zu erhalten.

Installation

Bevor Sie mit der Installation beginnen, führen Sie bitte eine Datensicherung durch. Beenden Sie alle noch laufenden Windows-Anwendungen auf Ihrem Rechner. **Wenn das BtM-Programm im Netzwerk installiert ist, muss es auf allen Arbeitsstationen geschlossen sein.**


Doppelklicken Sie auf die Datei **Start.exe** des Downloads.



Das Setup wird gestartet. Klicken Sie auf den Button **[Update BtM-Programm Version 4.3]**


In der Regel erscheint nun eine Sicherheitsfrage von Windows, ob durch das Programm Änderungen an Ihrem Computer vorgenommen werden dürfen. Bestätigen Sie diese mit **[Ja]**. Nach der Vorbereitung des Setups erscheint das Fenster „Willkommen zur Installation des BtM-Programms“.

Klicken Sie auf **[OK]**

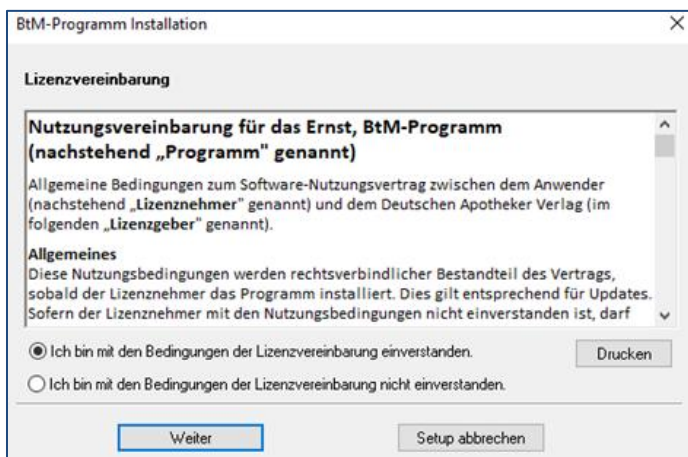


Die Lizenzvereinbarung wird angezeigt. Bestätigen Sie, dass Sie mit der Lizenzvereinbarung einverstanden sind und klicken Sie auf den Button **[Weiter]**, um mit der Installation fortzufahren.

Stimmen Sie der Vereinbarung nicht zu, wird die Installation beendet und das Programm nicht installiert.

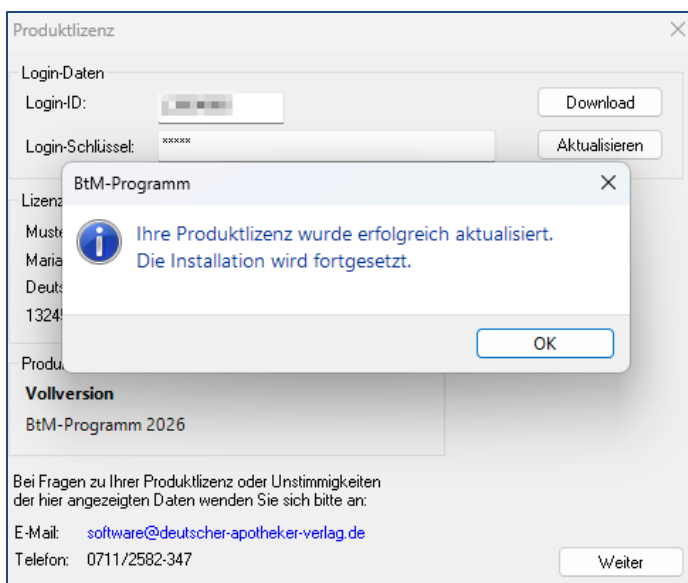


Schließen Sie die Meldung zur erfolgten Produktlizenzaktualisierung mit **[OK]**.

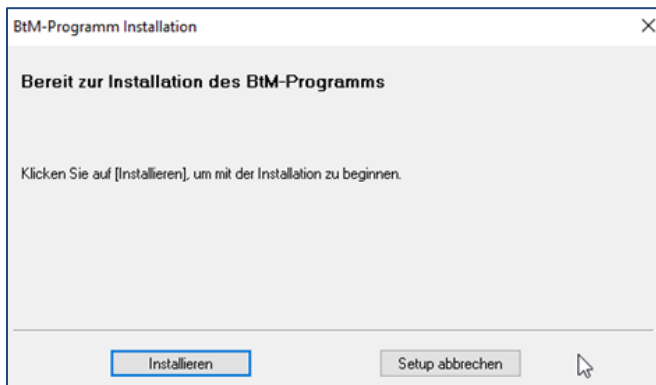

Starten Sie die Installation über den Button **[Installieren]**.

Warten Sie bis die Meldung zur erfolgreichen Installation erscheint und verlassen Sie den Installations-Assistenten über **[OK]**.

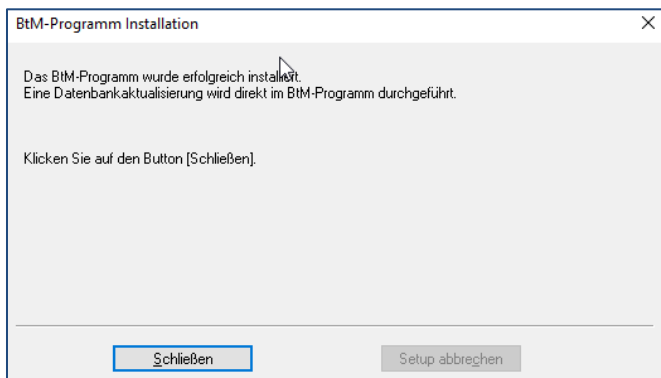

Klicken Sie auf **[Schließen]**.



Sie sehen wieder das Startfenster des Setup-Programms.

Schließen Sie diesen durch Klick auf **[Beenden]**.

Starten Sie das BtM-Programm.



Sie sehen die Meldung, dass eine Datenbankaktualisierung durchgeführt werden muss.

Klicken Sie auf **[Ja]**, um die Aktualisierung zu starten.

Nach Abschluss der Aktualisierung erscheint das Fenster „Datenupdate Änderungen“, in welchem Sie die Neuerungen des Updates nachlesen können. Eine Beschreibung der neuen Funktionen finden Sie auch unter „Hilfe | Programmhilfe | Was Ist Neu? | Neuerungen der Version 4.3“.

Onlineupdate

Im nächsten Schritt sehe Sie die Meldung, dass ein Onlineupdate bereitsteht. Spielen Sie dieses wie gewohnt ein.

BtM-Duplikate zusammenführen

Nach der Durchführung einer Datenbankaktualisierung kann es vorkommen, dass für dasselbe BtM zwei Karteikarten existieren. Dies tritt dann auf, wenn durch das Update ein neues BtM aufgenommen wird, für das Sie zuvor bereits selbst eine Karteikarte angelegt hatten.


Bitte überprüfen Sie deshalb im Anschluss an das Update, ob BtMs doppelt vorhanden sind. Wählen Sie dazu im Navigationsbereich „BtM-Liste anzeigen nach BtM-Status“. Es werden alle in der Datenbank gespeicherten BtM-Karteikarten angezeigt. In der Spalte BtM-Typ können Sie erkennen, welche BtMs selbst angelegt wurden (Eintrag „selbst angelegt“) und welche BtMs Bestandteil der ausgelieferten Datenbank sind (Eintrag „WinBtM“).

Suchen Sie in der Liste Ihre selbst angelegten BtM-Karteikarten und überprüfen Sie, ob eine weitere, redaktionelle BtM-Karteikarte des gleichen Namens existiert. Wenn ja, nutzen Sie die Funktion *BtM-Duplikate zusammenführen*, um die beiden Karteikarten miteinander zu verknüpfen. Eine der beiden Karteikarten wird dabei deaktiviert.

Eine ausführliche Beschreibung der Funktion *BtM-Duplikate zusammenführen* finden Sie in der Programmhilfe im Kapitel „BtM-Kartei | BtM-Duplikate zusammenführen“.

Aktualisierung der Produktlizenz an einem PC ohne Internetanschluss

Sollte Ihr PC über keinen Internetzugang verfügen oder aus einem anderen Grund keine Internetverbindung zum Lizenzserver aufbauen können, führen Sie die Aktualisierung bitte mit Hilfe eines USB-Sticks an einem PC mit direktem Internetzugang durch. Gehen Sie hierzu bitte wie folgt vor:

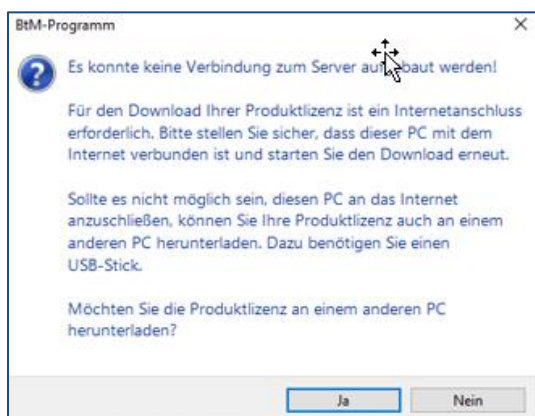


Wenn vor dem Update bereits eine Produktlizenz eingelesen war, erkennt das BtM-Programm automatisch, dass keine Verbindung hergestellt werden kann.


Sind noch keine Login Daten hinterlegt, müssen diese eingetragen werden.

Das BtM-Programm bietet Ihnen an, die Lizenz an einem anderen PC (mit Internet-Anschluss) herunterzuladen.


Stecken Sie hierzu zunächst einen USB-Stick in den BtM-Programm PC und bestätigen Sie anschließend mit [Ja].

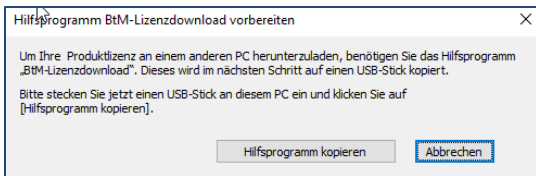


Klicken Sie im nächsten Fenster auf [Hilfsprogramm kopieren].

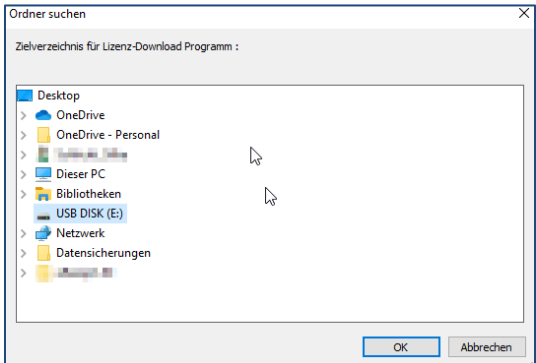

Wählen Sie Ihren USB-Stick aus und klicken Sie auf [OK]. Bitte verwenden Sie keine Unterordner!

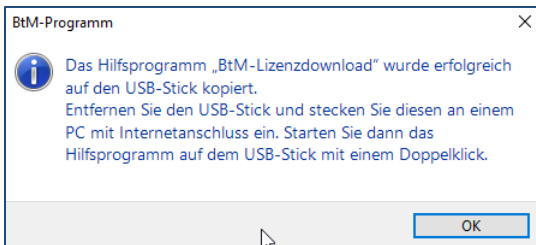

Das erfolgreiche Kopieren des Hilfsprogramms auf den USB-Stick wird durch das nebenstehende Fenster bestätigt. Schließen Sie das Fenster mit [OK].

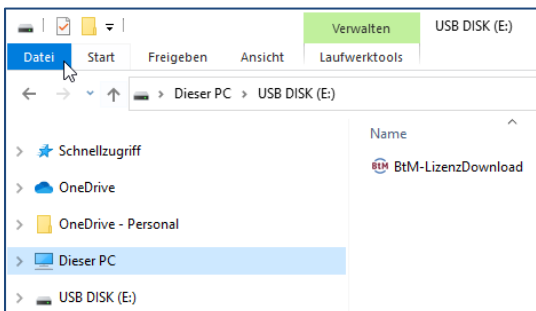

Entfernen Sie nun den USB-Stick **und stecken Sie diesen an einem PC mit Internetanschluss an.**

Lassen Sie sich an dem PC mit Internetzugang den Inhalt des USB-Sticks anzeigen.

Klicken Sie doppelt auf die „BtMLizenzDownload.exe“

Es öffnet sich das Hilfsprogramm „BtM Lizenz-Download“.




Tragen Sie daraufhin Ihre persönlichen Login Daten ein, die Sie per Mail erhalten haben und klicken Sie auf **[Download]**.


Nach erfolgreichem Download werden Ihre Produktlizenz-Daten im mittleren Fensterbereich angezeigt. Im unteren Fensterbereich sind Ihre freigeschalteten Produkte sichtbar.

Überprüfen Sie die Angaben und schließen Sie das Hilfsprogramm mit dem gleichnamigen Button.

Entfernen Sie den USB-Stick wieder **und stecken Sie ihn erneut an Ihrem BtM-Programm PC ein.**

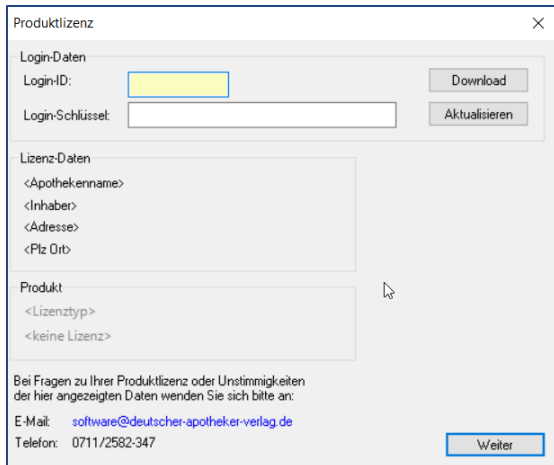


Klicken Sie erneut auf **[Download]** im Produktlizenz-Fenster.

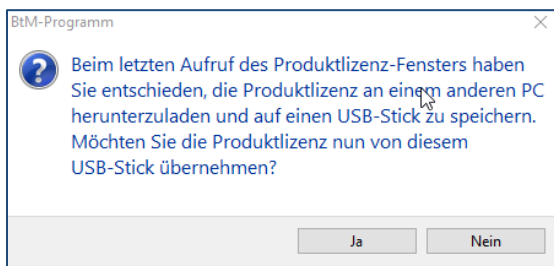


Das BtM-Programm hat sich Ihre Entscheidung gemerkt, die Lizenz an einem anderen PC herunterzuladen.

Bestätigen Sie die Frage, ob die Produktlizenz von dem angesteckten USB-Stick übernommen werden soll, mit **[Ja]**.

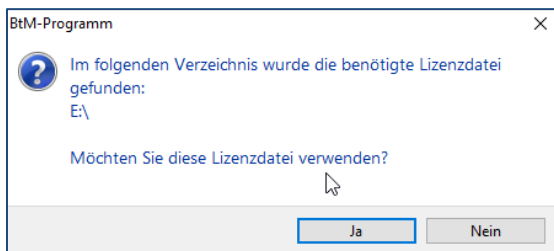

Die Lizenzdatei wird vom BtM-Programm automatisch auf dem angesteckten USB-Stick erkannt. Bestätigen Sie die Frage mit [Ja].

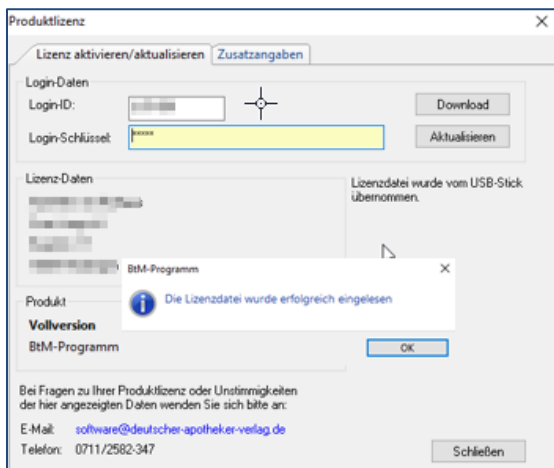

Die Lizenzdatei wird eingelesen und die Versionsnummer im Bereich Produkte angezeigt: **BtM-Programm 2026.**

Daraufhin führen Sie das Setup wie oben beschrieben fort.

Nach erfolgreicher Installation wird das BtM-Programm automatisch in der Version 4.3 gestartet.

Führen Sie dann unbedingt direkt die angebotene Datenbankaktualisierung durch!